

試験番号

最 終 報 告 書

試験番号：

表 題：エチルマルトールの細菌を用いる復帰突然変異試験

1. 目次

1.	目次	2
2.	試験実施概要	4
2.1	表題	4
2.2	試験番号	4
2.3	試験目的	4
2.4	参考としたガイドライン	4
2.5	試験委託者の名称および所在地	4
2.6	試験施設の名称および所在地	4
2.7	試験責任者	4
2.8	試験従事者	4
2.9	試験日程	5
2.10	予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのあ る事態および試験計画書に従わなかつたこと	5
2.11	資料の保存	5
2.12	試験責任者の署名	5
3.	要約	6
4.	被験物質および対照物質	7
4.1	被験物質	7
4.2	陰性対照物質	7
4.3	陽性対照物質	7
4.4	陽性対照溶液の調製	8
5.	指標菌株	9
5.1	試験菌株	9
5.2	菌株の識別	9
5.3	指標菌株の選択理由	9
5.4	菌株の保存および解凍	9
5.5	菌株の特性検査	10
5.6	前培養	10
6.	培地および調製試薬	11
6.1	最少グルコース寒天平板培地	11
6.2	ニュートリエントブロス No.2 培養液	11
6.3	トップアガー	12
6.4	0.1 mol/L リン酸緩衝液 (pH 7.4)	12
6.5	S9 mix の調製方法	13
7.	試験方法	14
7.1	溶媒	14

7.2	溶媒の選択理由	14
7.3	被験液の調製方法	14
7.4	プレート数.....	15
7.5	プレートの識別	15
7.6	試験操作 (プレインキュベーション法)	15
7.7	試験系の成立条件	16
7.8	判定基準	16
8.	試験結果.....	16
8.1	用量設定試験の観察結果および本試験用量の設定.....	16
8.2	本試験の観察結果	16
9.	考察	17
10.	参考文献.....	17

表

別表 1	試験結果表 (用量設定試験).....	19
別表 2	試験結果表 (本試験).....	20

図

別紙 1	図 1 TA100 における用量反応曲線 (本試験).....	21
	図 2 TA1535 における用量反応曲線 (本試験)	21
別紙 2	図 3 WP2uvrA における用量反応曲線 (本試験).....	22
	図 4 TA98 における用量反応曲線 (本試験)	22
別紙 3	図 5 TA1537 における用量反応曲線 (本試験)	23
	背景データ	24

2. 試験実施概要

2.1 表題

エチルマルトールの細菌を用いる復帰突然変異試験

2.2 試験番号

[REDACTED]

2.3 試験目的

エチルマルトールの安全性評価の一環として、細菌を用いて遺伝子突然変異誘発能の有無を明らかにすることを目的とした。

2.4 参考としたガイドライン

- 「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成 8 年 3 月 22 日付衛化第 29 号生活衛生局長通知)

2.5 試験委託者の名称および所在地

名称：国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺伝部

[REDACTED]

2.6 試験施設の名称および所在地

[REDACTED]

2.7 試験責任者

[REDACTED]

2.8 試験従事者

用量設定試験

使用菌株の前培養 :

被験液の調製 :

試験操作 :

コロニーの計数 :

本試験

使用菌株の前培養 :

被験液の調製 :

試験操作 : [REDACTED]
コロニーの計数 : [REDACTED]

2.9 試験日程

試験開始日 : [REDACTED]
用量設定試験開始日 : [REDACTED]
用量設定試験終了日 : [REDACTED]
本試験開始日 : [REDACTED]
本試験終了日 : [REDACTED]
試験終了日 : [REDACTED]

**2.10 予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事
態および試験計画書に従わなかったこと**

本試験において予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事
態および試験計画書に従わなかったことはなかった。

2.11 資料の保存

試験計画書、記録文書、生データおよび報告書類を資料として、[REDACTED]
[REDACTED]の資料保存施設に保存する。なお、その期間は最終報告書提出後3年
間とする。期間終了後の保存については、試験委託者と[REDACTED]
[REDACTED]間で協議し、その処置を決定する。

2.12 試験責任者の署名

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

3. 要約

エチルマルトールの遺伝子突然変異誘発能の有無を検討するため、ネズミチフス菌 *Salmonella typhimurium* (以下、*S. typhimurium* と略す) TA100, TA1535, TA98, TA1537 および大腸菌 *Escherichia coli* (以下、*E. coli* と略す) WP2 *uvrA* を用いて、代謝活性化する場合および代謝活性化しない場合の条件下で、プレインキュベーション法により実施した。なお、被験物質の溶媒にはジメチルスルホキシド (以下 DMSO) を用いた。

本試験用量を設定するため、5000 µg/plate を最高用量として以下公比 4 で 4 段階希釈した 5000, 1250, 313, 78.1, 19.5 µg/plate の計 5 用量で用量設定試験を実施した。その結果より、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても生育阻害が認められず、被験物質による沈殿も認められなかった。このため本試験は、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株についても 5000, 2500, 1250, 625, 313 µg/plate の計 5 用量で実施した。


用量設定試験および本試験ともに本被験物質処理による復帰変異コロニー数は、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても陰性対照値の 2 倍以上となる増加は認められず、用量反応性も認められなかった。

以上の試験結果より、本試験条件下においてエチルマルトールは、細菌に対する遺伝子突然変異誘発能を有さない (陰性) と判定した。

4. 被験物質および対照物質

4.1 被験物質

名称	エチルマルトール
供給元	[REDACTED]
入手日	[REDACTED]
風袋量込	9.353 g
ロット番号	[REDACTED]
CAS 番号	4940-11-8
官報公示整理番号	化審法：(S)-678
純度	99.0 %以上
不純物の名称及び濃度	不明
構造式	

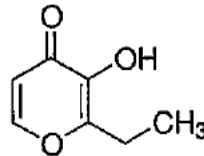

分子量	140.14
常温における性状	白色結晶
融点	89-93°C
沸点	161°C (0.67kPa)
溶解度	水：50 mg/mL で不溶 DMSO：50 mg/mL で溶解
溶媒中での安定性	水，DMSO：発熱，ガスの発生等の反応性なし
有効期限	情報なし
保存条件	冷暗所
保存場所	[REDACTED]
残量の取扱い	実験終了後の残量は試験委託者に返却する。

溶解度および溶媒中での安定性は、[REDACTED]で実施した溶解性試験の結果による。

4.2 陰性対照物質

被験物質の調製に用いた DMSO を陰性対照物質とした。

4.3 陽性対照物質^{1),2)}

以下の変異原物質を陽性対照物質とした。試験に使用した陽性対照物質名，Lot No.，純度および保存方法を表 1 示した。

表 1 陽性対照物質

陽性対照物質	Lot No.	純度(%)	保存方法
AF-2	XXXXXXXXXX	99.7%	室温, 遮光
NaN ₃		99.6%	室温, 遮光
ICR-191			室温, 遮光
2-AA		96.7%	室温, 遮光
B[a]P		99.9%	冷蔵, 遮光

- AF-2 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide (富士フィルム和光純薬株式会社 ; CAS No.3688-53-7, 和光特級)
- NaN₃ Sodium azide (富士フィルム和光純薬株式会社 ; CAS No.26628-22-8, 試薬特級)
- ICR-191 2-Methoxy-6-chloro-9-[3-(2-chloroethyl)aminopropylamino]acridine·2HCl (Polysciences, Inc. ; CAS No.17070-45-0)
- 2-AA 2-Aminoanthracene (富士フィルム和光純薬株式会社 ; CAS No. 613-13-8)
- B[a]P Benzo[a]pyrene (富士フィルム和光純薬株式会社 ; CAS No.50-32-8)

保存場所 XXXXXXXXXX

4.4 陽性対照溶液の調製

陽性対照物質は DMSO (富士フィルム和光純薬株式会社, JIS 規格 試薬特級 ; Lot No. XXXXXXXXXX) に溶解した。ただし, NaN₃ については注射用水 (株式会社大塚製薬工場, 日本薬局方 ; Lot No. XXXXXXXXXX) に溶解した。調製した陽性対照溶液は, 約 1 mL ずつ分注後 -20°C 以下で保存し, 調製後 6 ヶ月以内のものを使用した。なお, 試験実施時に解凍して使用した。それぞれの名称および処理用量を表 2 に示した。

表 2 陽性対照物質調製濃度

使用菌株	代謝活性化しない場合		代謝活性化する場合	
	陽性対照物質名	処理用量 (µg/plate)	陽性対照物質名	処理用量 (µg/plate)
<i>S. typhimurium</i> TA100	AF-2	0.01	B[a]P	5.0
<i>S. typhimurium</i> TA1535	NaN ₃	0.5	2AA	2.0
<i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	AF-2	0.01	2AA	10.0
<i>S. typhimurium</i> TA98	AF-2	0.1	B[a]P	5.0
<i>S. typhimurium</i> TA1537	ICR-191	1.0	B[a]P	5.0

5. 指標菌株^{3),4),5),6),7)}

5.1 試験菌株

S. typhimurium TA1535, TA98, TA1537, *E. coli* WP2 *uvrA* は独立行政法人 製品評価技術基盤機構より XXXXXXXXXX に、*S. typhimurium* TA100 は国立研究開発法人 理化学研究所より XXXXXXXXXX に入手した菌株を継代培養した菌株を使用した。

5.2 菌株の識別

菌株の種類毎に、以下に示す色のマーカー等を使用して識別した。

- S. typhimurium* TA100 青
- S. typhimurium* TA1535 桃
- E. coli* WP2 *uvrA* 茶
- S. typhimurium* TA98 赤
- S. typhimurium* TA1537 緑

5.3 指標菌株の選択理由

当該菌株は変異原性物質に対する感受性が高く、細菌を用いる復帰突然変異試験に最も一般的に使用されている。試験に使用する菌株がそれぞれ保持する遺伝的な特性を表3に示した。

表3 菌株の遺伝的特性

菌株	変異遺伝子	付帯突然変異			検出可能な突然変異型
		DNA修復	膜変異	R因子	
<i>S. typhimurium</i> TA100	<i>hisG</i>	<i>uvrB</i>	<i>rfa</i>	pKM101	塩基対置換
<i>S. typhimurium</i> TA1535	<i>hisG</i>	<i>uvrB</i>	<i>rfa</i>	—	塩基対置換
<i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	<i>trpE</i>	<i>uvrA</i>	+	—	塩基対置換
<i>S. typhimurium</i> TA98	<i>hisD</i>	<i>uvrB</i>	<i>rfa</i>	pKM101	フレームシフト
<i>S. typhimurium</i> TA1537	<i>hisC</i>	<i>uvrB</i>	<i>rfa</i>	—	フレームシフト

5.4 菌株の保存および解凍

入手した菌株から継代して凍結保存した菌懸濁液を培養し、得られた菌懸濁液 8.0 mL に対して DMSO (富士フィルム和光純薬株式会社, JIS 規格試薬特級, Lot No. XXXXXXXXXX) を 0.7 mL の割合で添加した。これを滅菌チューブに 0.3 mL ずつ分注し、ドライアイス-アセトンで急速凍結した後、-70°C 以下の超低温フリーザ

(MDF-C8V1：パナソニックヘルスケア株式会社)で保存した。なお、使用する際は水温下で解凍し、使用後の残液は廃棄した。

5.5 菌株の特性検査

凍結保存菌株を用いて、各菌株のアミノ酸要求性、紫外線感受性、膜変異 *rfa* 特性、薬剤耐性因子 R-factor プラスミド、生菌数、陰性対照値、陽性対照値、もどり菌の特性を検査し、それぞれの菌株に特有の性質が保持されていることを確認した。試験に使用した菌株の凍結保存日および特性検査実施期間を表4に示した。

表4 菌株の保存および特性検査実施日

菌株	凍結保存日	特性検査実施期間
<i>S. typhimurium</i> TA100		
<i>S. typhimurium</i> TA1535		
<i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>		
<i>S. typhimurium</i> TA98		
<i>S. typhimurium</i> TA1537		

5.6 前培養^{1),2)}

- ① 滅菌済みL字型試験管(容量48 mL)にニュートリエントブロス No.2 培養液を10 mL 入れ、これに凍結保存菌株を解凍した菌懸濁液を、*S. typhimurium* TA 株は各20 μ L、*E. coli* WP2 *uvrA* 株は10 μ L 植菌し、振盪恒温槽(COOL BATH SHAKER ML-10 PU-6 接続型、タイテック株式会社)にセットした。なお、使用後の菌懸濁液は廃棄した。
- ② プログラム制御により前培養開始まで4°C水浴中で放置した後、振盪(100回/分)しながら37°Cに加温して10時間前培養した。
- ③ 前培養終了時に各菌懸濁液の吸光度をデジタル比色計でOD値を測定し、生菌数が 1×10^9 個/mL以上あることを確認して試験に使用した。なお、測定したOD値からの換算生菌数を表5に示した。

表 5 換算生菌数 (個/mL)

菌 株	用量設定試験	本試験
<i>S. typhimurium</i> TA100	2.58×10^9	2.64×10^9
<i>S. typhimurium</i> TA1535	5.04×10^9	5.24×10^9
<i>E. coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	8.62×10^9	7.10×10^9
<i>S. typhimurium</i> TA98	4.89×10^9	4.68×10^9
<i>S. typhimurium</i> TA1537	3.10×10^9	3.03×10^9

6. 培地および調製試薬

6.1 最少グルコース寒天平板培地

- ① 名称 : バイタルメディア AMT-S 培地
 製造元 : 極東製薬工業株式会社
 Lot No. : XXXXXXXXXX
 製造日 : XXXXXXXXXX
 購入日 : XXXXXXXXXX
 保存方法 : 室温
- ② 使用寒天
 名称 : 大洋寒天
 製造元 : SSK セールス株式会社
 Lot No. : XXXXXXXXXX

6.2 ニュートリエントブロス No.2 培養液

ニュートリエントブロス No.2 を 2.5 wt% となるよう精製水で溶解し、オートクレーブを用いて滅菌処理 (121°C, 20 分) を行い、調製した。調製後は使用時まで冷蔵で保存し、1 ヶ月以内のものを使用した。

- 名称 : ニュートリエントブロス No.2 (Nutrient Broth No.2)
 Lot No. : XXXXXXXXXX
 製造元 : OXOID LTD.
 保存方法 : 室温
 保存場所 : XXXXXXXXXX

6.3 トップアガー

0.6 wt%寒天および0.5wt%塩化ナトリウムの割合で調製した軟寒天液をオートクレーブで滅菌処理(121°C, 20分)した後、これに0.5 mmol/L D-ビオチン-L-ヒスチジン-L-トリプトファン溶液を10に対して1の割合で加えて調製し、*S. typhimurium* TA株と*E. coli*株で共通で使用した。調製後は使用時まで室温で保存し、1ヶ月以内のものを使用した。

① 寒天

名称 : Bacto Agar
製造元 : Becton, Dickinson and Company
Lot No. :
保存方法 : 室温
保存場所 :

② 塩化ナトリウム

製造元 : 富士フイルム和光純薬株式会社
Lot No. :
保存方法 : 室温
保存場所 :

③ D-ビオチン

製造元 : 富士フイルム和光純薬株式会社
Lot No. :
保存方法 : 冷蔵, 遮光
保存場所 :

④ L-ヒスチジン塩酸塩一水和物

製造元 : 富士フイルム和光純薬株式会社
Lot No. :
保存方法 : 室温
保存場所 :

⑤ L-トリプトファン

製造元 : 富士フイルム和光純薬株式会社
Lot No. :
保存方法 : 室温
保存場所 :

6.4 0.1 mol/L リン酸緩衝液 (pH 7.4)

りん酸緩衝剤粉末3包に対して2Lの精製水を加えて溶解し、オートクレーブを用いて滅菌処理(121°C, 20分)を行い、調製した。調製後は使用時まで冷蔵で保存し、1ヶ月以内のものを使用した。

名称 : りん酸緩衝剤粉末 (1/15 mol/L pH 7.4)

製造元 : 富士フィルム和光純薬株式会社
 Lot No. : XXXXXXXXXX
 組成 (1包あたり) : Na_2HPO_4 : 7.6 g, KH_2PO_4 : 1.8 g
 保存方法 : 室温
 保存場所 : XXXXXXXXXX

6.5 S9 mix の調製方法

Cofactor-I の 1 バイアルに滅菌精製水を 9.0 mL 加え、完全に溶解した後ろ過 (NALGENE 0.45 μm : Lot No. XXXXXXXXXX) 滅菌した。これに Cofactor-I の 1 バイアルに対して 1.0 mL の S9 を加えて S9 mix とした。調製した S9 mix は使用まで冷蔵で保存し、使用後の残液は廃棄した。

① S9

名称 : S9
 製造元 : 家田貿易株式会社
 Lot No. : XXXXXXXXXX
 製造日 : XXXXXXXXXX
 購入日 : XXXXXXXXXX
 種・系統 : ラット・SD 系
 週齢・性 : 7 週齢・雄
 体重 : (XXXXXXXXXX) 185-239 g
 (XXXXXXXXXX) 194-238 g
 誘導物質 : フェノバルビタール (PB) および 5,6-ベンゾフラボン (BF)
 投与方法 : 腹腔内投与
 投与期間および投与量 : PB 4 日間連続投与 : 30+60+60+60 (mg/kg 体重)
 PB 投与 3 日目 BF 投与 : 80 (mg/kg 体重)
 保存方法 : 冷凍保存 (-70°C 以下)
 保存場所 : XXXXXXXXXX (超低温フリーザ MDF-C8V1 : パナソニックヘルスケア株式会社)

② 補酵素

名称 : Cofactor-I
 製造元 : オリエンタル酵母工業株式会社
 Lot No. : XXXXXXXXXX
 製造日 : XXXXXXXXXX
 購入日 : XXXXXXXXXX

保存方法 : 冷蔵
 保存場所 : (冷凍・冷蔵庫 MPR-414F : パナソニック ヘルスケア株式会社)

③ S9 mix の組成(1 mL 中)

水 : 0.9 mL
 S9 : 0.1 mL
 MgCl₂ : 8 μmol/mL
 KCl : 33 μmol/mL
 グルコース-6-リン酸 : 5 μmol/mL
 還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 (NADPH)
 : 4 μmol/mL
 還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NADH)
 : 4 μmol/mL
 リン酸ナトリウム緩衝液 (pH7.4)
 : 100 μmol/mL

7. 試験方法

7.1 溶媒⁸⁾

名称 : DMSO
 製造元 : 富士フイルム和光純薬株式会社
 ロット番号 :
 規格 : JIS 規格 試薬特級
 純度 : 100.0 %
 保存方法 : 室温
 保存場所 :

7.2 溶媒の選択理由

水, DMSO について溶解性試験を実施した結果, 水では 50 mg/mL で溶解せず, DMSO では 50 mg/mL で溶解したため, DMSO を溶媒とした。

7.3 被験液の調製方法

① 用量設定試験用被験液の調製

滅菌した調製用試験管に電子天秤を用いて被験物質を分取して秤量し, その秤量値 224.0 mg に最高調製濃度の 50 mg/mL となるように溶媒量を計算した。算出した液量 4.480 mL の DMSO を添加して溶解し, 50 mg/mL の被験液を調製した。次いで, これを以下公比 4 で順次 4 段階希釈し, 50, 12.5, 3.13, 0.781, 0.195 mg/mL の計 5 濃度の被験液を調製した。なお, 被験液の調製および試験操作は紫外線防止環境下で行い, その過程において発熱, 発泡等の反応性は認められなかった。

② 本試験用被験液の調製

滅菌した調製用試験管に電子天秤を用いて被験物質を分取して秤量し、その秤量値 284.0 mg に最高調製濃度の 50 mg/mL となるように溶媒量を計算した。算出した液量 5.680 mL の DMSO を添加して溶解し、50 mg/mL の被験液を調製した。次いで、これを公比 2 で順次 4 段階希釈し 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13 mg/mL の計 5 濃度の被験液を調製した。なお、被験液の調製および試験操作は紫外線防止環境下で行い、その過程において発熱、発泡等の反応性は認められなかった。

7.4 プレート数

用量設定試験、本試験ともに被験物質処理群、陰性対照群および陽性対照群のいずれについても 2 枚のプレートを用いた。

7.5 プレートの識別

最少グルコース寒天平板培地のふたに以下の内容で、各菌株に割り当てた色のマーカーで識別した。試験番号は下 2 桁の番号とし、代謝活性化しない場合は「-」、代謝活性化する場合は「+」とし、これに続けて陰性対照を「SC」、陽性対照を「PC」、被験物質処理群を濃度の低い方から「1」、「2」、「3」…の番号を各菌の色のマーカーでシャーレのふたに記載し、識別した。

7.6 試験操作 (ブレインキュベーション法)^{1),2)}

- ① 滅菌した小試験管に被験液、溶媒または陽性対照溶液を 0.1 mL 入れ、これに代謝活性化しない場合は 0.1 mol/L リン酸緩衝液 (pH 7.4) 0.5 mL を、代謝活性化する場合は S9 mix 0.5 mL を加えた後、それぞれの小試験管に各菌株の菌懸濁液を 0.1 mL 加え、攪拌した。
- ② 攪拌後、すぐに 37°C で 20 分間振盪 (80 回/分) しながらブレインキュベーションした。
- ③ ブレインキュベーション終了後、あらかじめ電子レンジを用いて溶解し、卓上恒温槽で 45°C に保持したトップアガーを小試験管に 2.0 mL 加えて攪拌後、最少グルコース寒天平板培地に均一に重層した。
- ④ 無菌試験として、調製した最高用量の被験液 0.1 mL および調製した S9 mix 0.5 mL をそれぞれ小試験管に取り、これにトップアガーを 2.0 mL 加えた後に最少グルコース寒天平板培地に均一に重層した。なお、これら①～④の一連の操作は、紫外線防止環境下で実施した。
- ⑤ 最少グルコース寒天平板培地に重層したトップアガーが固化したことを確認後、最少グルコース寒天平板培地を逆さにしてインキュベータに入れ、37°C で用量設定試験、本試験ともに 48 時間培養した。
- ⑥ 培養後、プレート上の被験物質による沈殿および着色を確認した結果、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれも認められなかったため、DOT COUNTER (家田

貿易株式会社)を用いて計数(面積補正および数え落とし補正)した。また、実体顕微鏡を用いて生育阻害の有無を観察した。

7.7 試験系の成立条件

陽性対照値がそれぞれの菌株の陰性対照値に比較して2倍以上となる復帰変異コロニー数の増加を示し、陰性対照値および陽性対照値の復帰変異コロニー数の平均値が背景データの管理値内であり、無菌試験および試験操作において雑菌の混入などの異常も認められなかったため、試験が適切に実施されたものと判断した。

7.8 判定基準^{1),2),9)}

被験物質処理群の復帰変異コロニー数が陰性対照値に対して2倍以上となる増加を示し、用量反応性および再現性が認められた場合、あるいは明確な用量反応性を示さない場合であっても陰性対照値に対して2倍以上となる復帰変異コロニー数の増加を示し、再現性が認められた場合に陽性と判定することとした。なお、判定に際して統計学的手法は用いなかった。

8. 試験結果

用量設定試験の結果を別表1、本試験の結果を別表2に示した。なお、図1~5は別表2より作成した。

8.1 用量設定試験の観察結果および本試験用量の設定

本試験の試験用量を設定するため、50 mg/mLの被験液を公比4で4段階希釈した計5用量(5000, 1250, 313, 78.1, 19.5 µg/plate)を用い、用量設定試験を実施した。

その結果、本被験物質によるプレート上の沈殿および着色は代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの用量においても認められなかった。実体顕微鏡を用いて本被験物質処理による菌に対する生育阻害を観察した結果、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても認められなかった。

本被験物質処理による復帰変異コロニー数は、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても陰性対照値の2倍以上となる増加は認められず、用量反応性も認められなかった。

このため本試験は、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株についても5000 µg/plateを最高用量として5000, 2500, 1250, 625, 313 µg/plateの計5用量を設定した。

8.2 本試験の観察結果

本被験物質によるプレート上の沈殿および着色は代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの用量においても認められなかった。実体顕微鏡を用いて本被験物質処理による菌に対する生育阻害を観察した結果、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても認められなかった。

本被験物質処理による復帰変異コロニー数は、代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの菌株においても陰性対照値の2倍以上となる増加は認められず、用量反応性も認められなかった。

9. 考察

用量設定試験および本試験ともに代謝活性化の有無にかかわらず、塩基対置換型およびフレームシフト型のいずれの菌株においても陰性対照値の2倍以上となる復帰変異コロニー数の増加は認められず、用量反応性も認められなかった。

なお、類縁化合物と考えられるエチルバニリン (CAS No. 121-32-4) では Ames 試験において「陰性」¹⁰⁾、CHO 細胞を用いる染色体異常試験および in vivo 小核試験において「陰性」¹¹⁾、バニリン (CAS No. 121-33-5) では姉妹染色分体交換試験において「陰性」¹²⁾と報告されている。

以上の試験結果より、本試験条件下においてエチルマルトールは、細菌に対する遺伝子突然変異誘発能を有さない(陰性)と判定した。

10. 参考文献

- 1) 田島彌太郎, 賀田恒夫, 近藤宗平, 外村晶(編): 環境変異原実験法, 講談社, pp.56-68, 1980.
- 2) 労働省安全衛生部化学物質調査課編: 新・微生物を用いる変異原性試験ガイドブック, 中央労働災害防止協会, 1986.
- 3) B.N.Ames, F.D.Lee and W.E.Durston: An Improved Bacterial Test System for the Detection and Classification of Mutagens and Carcinogens, Proc.Nat. Acad.Sci., USA, 70, No.3, pp.782-786, March 1973.
- 4) J.McCann, N.E.Spingarn, J.Kobori and B.N.Ames: Detection of Carcinogens as Mutagens: Bacterial Tester Strains with R Factor Plasmids, Proc.Nat. Acad.Sci., USA, 72, No.3, pp.979-983, March 1975.
- 5) M.H.L.Green and W.J.Muriel: Mutagen Testing using Trp+ Reversion in *Escherichia coli*, Mutation Res., 38, pp.3-32, 1976.
- 6) T.Yahagi, M.Nagao, Y.Seino, T.Matsushima, T.Sugimura and M.Okada: Mutagenicities of N-nitrosamines on *Salmonella*, Mutation Res., 48, pp.121-130, 1977.
- 7) Dorothy M. Maron and Bruce N. Ames: Revised methods for the *Salmonella* mutagenicity test, Mutation Res., 113, pp.173-215, 1983.
- 8) Dorothy M. Maron, John Katzenellenbogen and Bruce N. Ames: Compatibility of Organic solvents with the *Salmonella*/Microsome test, Mutation Res., 88, pp.343-350, 1981.
- 9) 石館基(監修): 微生物を用いる変異原性試験データ集(能美健彦, 松井道子編集), 株式会社エル・アイ・シー, 東京, 1991.

- 10) Mortelmans K et al; *Environ Mutagen* 8:1-119 (1986).
- 11) WHO/JECFA; Joint Expert Committee on Food Additives monograph 683. Ethyl vanillin (WHO Food Additives Series 26). Available from, as of June 9, 2015.
- 12) Jansson T and Zech L; *Mutat Res* 190:221-224 (1987).

試験結果表 (用量設定試験)

被験物質の名称 : エチルマルトール

試験番号 : [REDACTED]

試験実施期間	より [REDACTED]						
	代謝活性化系の有無	被験物質の用量 (µg/plate)	復帰変異数 (コロニー数/プレート)				
			塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2uvrA	TA98	TA1537	
-S9 mix	陰性対照 (DMSO)	126 134 (130)	15 11 (13)	16 17 (17)	29 24 (27)	13 6 (10)	
	19.5	140 146 (143)	9 15 (12)	14 26 (20)	30 19 (25)	11 9 (10)	
	78.1	136 131 (134)	18 9 (14)	21 26 (24)	20 27 (24)	8 13 (11)	
	313	150 128 (139)	17 16 (17)	23 19 (21)	24 29 (27)	7 8 (8)	
	1250	125 133 (129)	10 17 (14)	23 24 (24)	25 25 (25)	13 8 (11)	
	5000	134 149 (142)	15 15 (15)	24 28 (26)	19 17 (18)	7 8 (8)	
	+S9 mix	陰性対照 (DMSO)	144 149 (147)	15 15 (15)	31 27 (29)	35 45 (40)	15 12 (14)
19.5		132 130 (131)	6 10 (8)	25 20 (23)	32 26 (29)	14 10 (12)	
78.1		146 138 (142)	12 14 (13)	18 22 (20)	42 36 (39)	14 5 (10)	
313		112 138 (125)	10 14 (12)	25 29 (27)	33 36 (35)	12 15 (14)	
1250		119 137 (128)	11 18 (15)	21 36 (29)	29 31 (30)	13 12 (13)	
5000		151 175 (163)	18 19 (19)	40 27 (34)	34 32 (33)	14 12 (13)	
陽性対照		名称	AF-2	NaN ₃	AF-2	AF-2	ICR-191
	用量(µg/plate)	0.01	0.5	0.01	0.1	1.0	
S9 mixを必要としないもの	コロニー数/プレート	591 624 (608)	528 477 (503)	109 102 (106)	497 524 (511)	2177 2375 (2276)	
	名称	B[a]P	2-AA	2-AA	B[a]P	B[a]P	
S9 mixを必要とするもの	用量(µg/plate)	5.0	2.0	10.0	5.0	5.0	
	コロニー数/プレート	1165 1084 (1125)	334 324 (329)	527 489 (508)	316 346 (331)	54 53 (54)	

【備考】

DMSO : ジメチルスルホキシド

AF-2 : 2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド

NaN₃ : アジ化ナトリウム

ICR-191 : 2-メトキシ-6-クロロ-9-[3-(2-クロロエチル)アミノプロピルアミノ]アクリジン・2HCl

2-AA : 2-アミノアントラセン

B[a]P : ベンゾ[a]ピレン

() 内は、2枚のプレートの平均値を示す。

別表 2

試験結果表 (本試験)

被験物質の名称 : エチルマルトール

試験番号 : XXXXXXXXXX



試験実施期間		より				
代謝活性化系の有無	被験物質の用量 (µg/plate)	復帰変異数 (コロニー数/プレート)				
		塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2uvrA	TA98	TA1537
-S9 mix	陰性対照 (DMSO)	104 117 (111)	9 15 (12)	24 16 (20)	29 32 (31)	7 3 (5)
	313	104 120 (112)	15 11 (13)	17 32 (25)	37 29 (33)	2 7 (5)
	625	131 125 (128)	7 11 (9)	19 16 (18)	26 39 (33)	1 4 (3)
	1250	138 122 (130)	14 14 (14)	16 28 (22)	25 37 (31)	4 3 (4)
	2500	118 107 (113)	17 9 (13)	24 33 (29)	32 29 (31)	8 6 (7)
	5000	117 139 (128)	19 14 (17)	25 27 (26)	15 26 (21)	3 6 (5)
	+S9 mix	陰性対照 (DMSO)	123 110 (117)	11 8 (10)	21 36 (29)	37 42 (40)
313		119 108 (114)	12 11 (12)	27 19 (23)	39 40 (40)	3 5 (4)
625		117 114 (116)	11 13 (12)	25 19 (22)	40 41 (41)	10 10 (10)
1250		118 155 (137)	14 8 (11)	29 30 (30)	41 45 (43)	8 9 (9)
2500		117 129 (123)	15 13 (14)	27 26 (27)	38 39 (39)	11 10 (11)
5000		138 163 (151)	11 13 (12)	27 29 (28)	34 32 (33)	13 8 (11)
陽性対照		名称	AF-2	NaN ₃	AF-2	AF-2
	用量(µg/plate)	0.01	0.5	0.01	0.1	1.0
S9 mixを必要とするもの	コロニー数/プレート	449 490 (470)	392 399 (396)	103 81 (92)	507 561 (534)	1912 1790 (1851)
	名称	B[a]P	2-AA	2-AA	B[a]P	B[a]P
S9 mixを必要とするもの	用量(µg/plate)	5.0	2.0	10.0	5.0	5.0
	コロニー数/プレート	1066 1065 (1066)	259 262 (261)	452 554 (503)	265 354 (310)	72 50 (61)

[備考]



- DMSO : ジメチルスルホキシド
 AF-2 : 2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド
 NaN₃ : アジ化ナトリウム
 ICR-191 : 2-メトキシ-6-クロロ-9-[3-(2-クロロエチル)アミノプロピルアミノ]アクリジン・2HCl
 2-AA : 2-アミノアン트라セン
 B[a]P : ベンゾ[a]ピレン

() 内は、2枚のプレートの平均値を示す。


用量反応曲線(本試験)

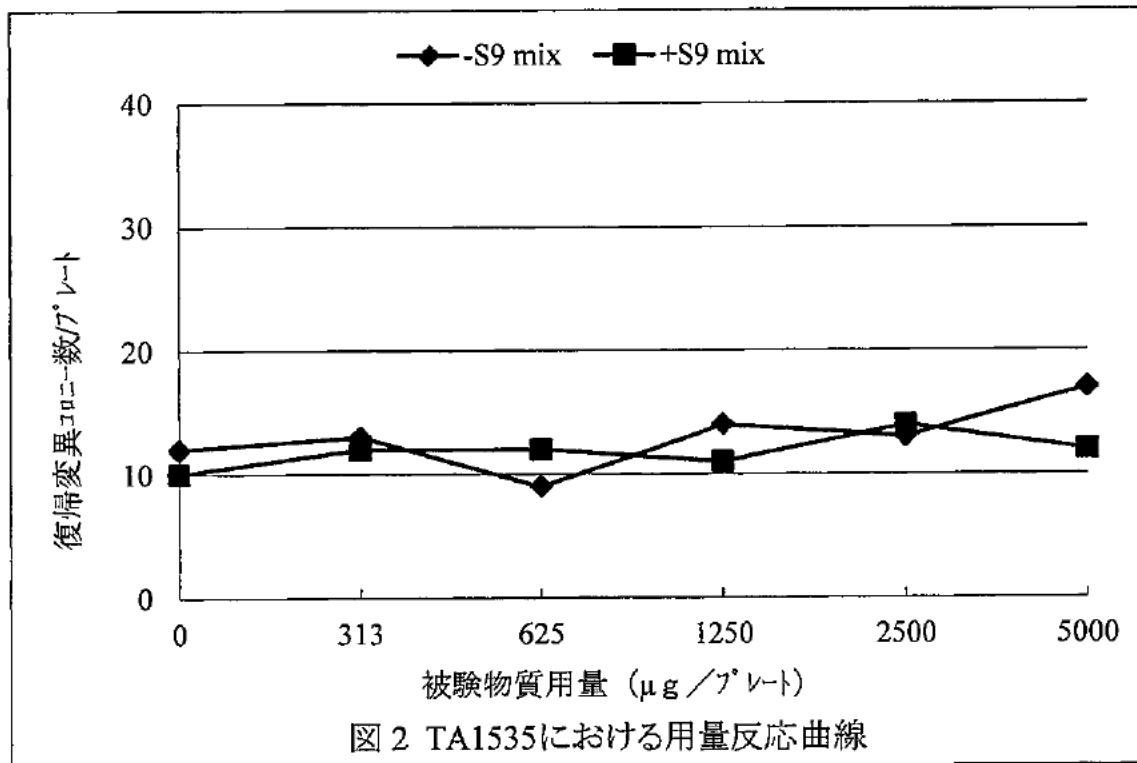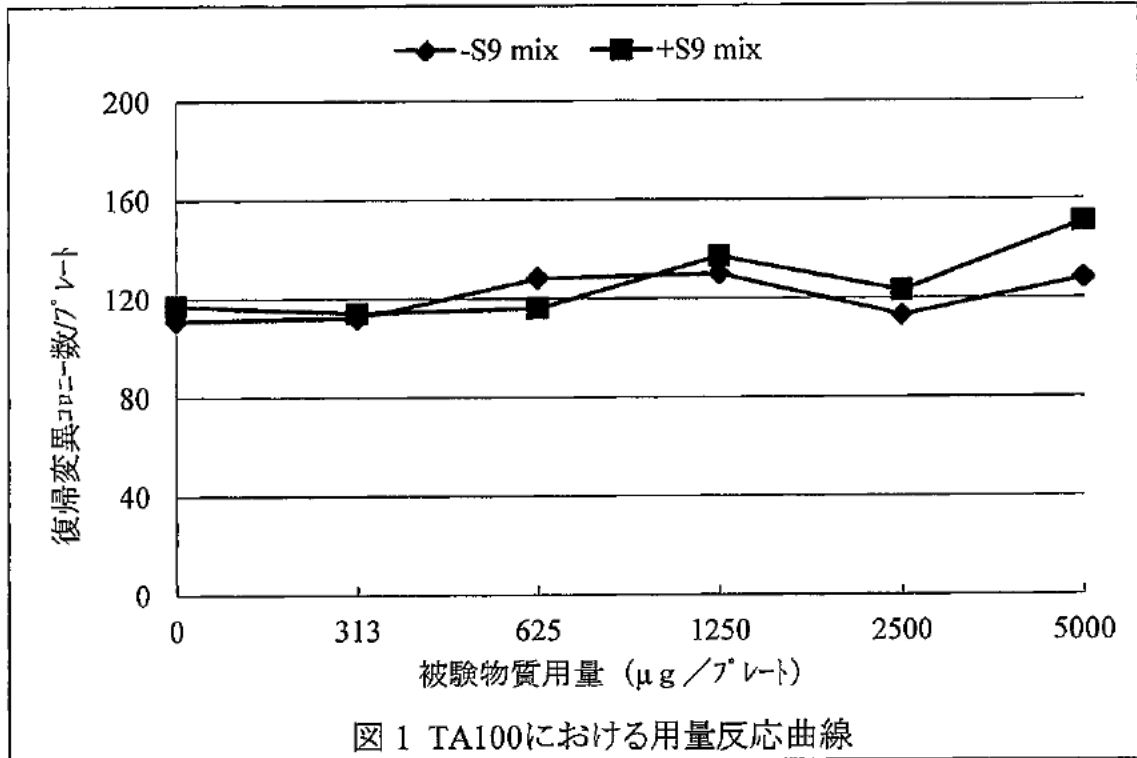

用量反応曲線(本試験)

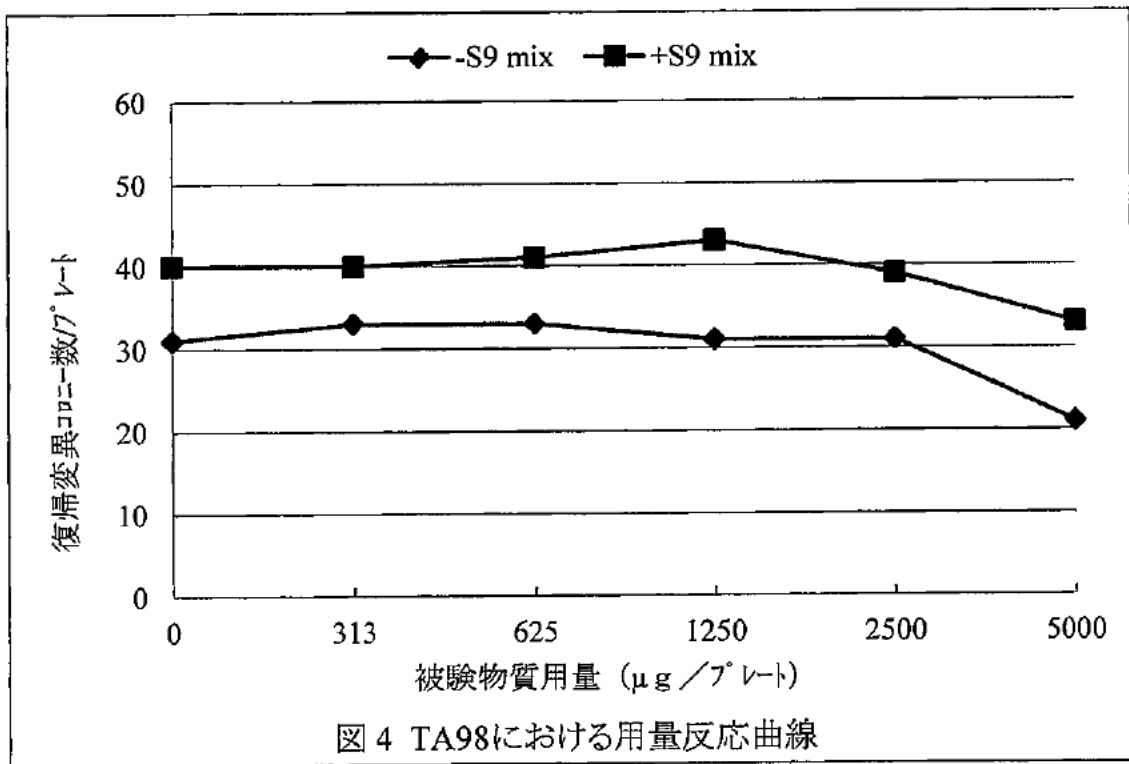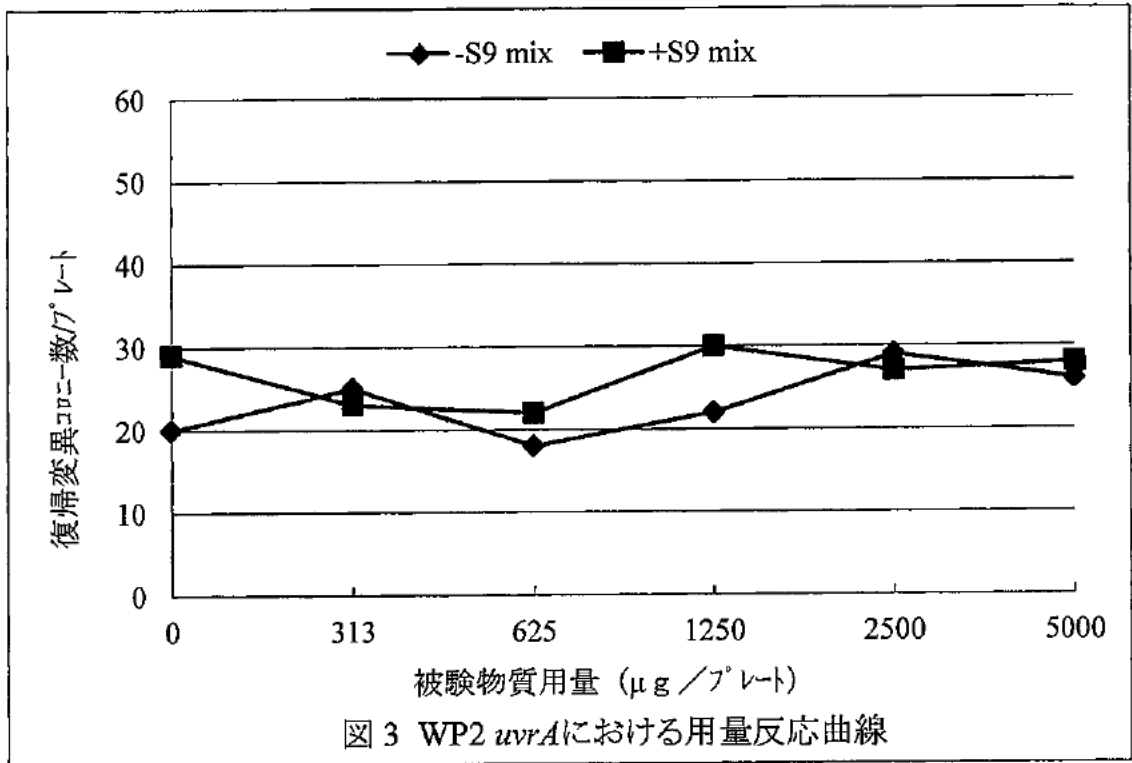

用量反応曲線(本試験)

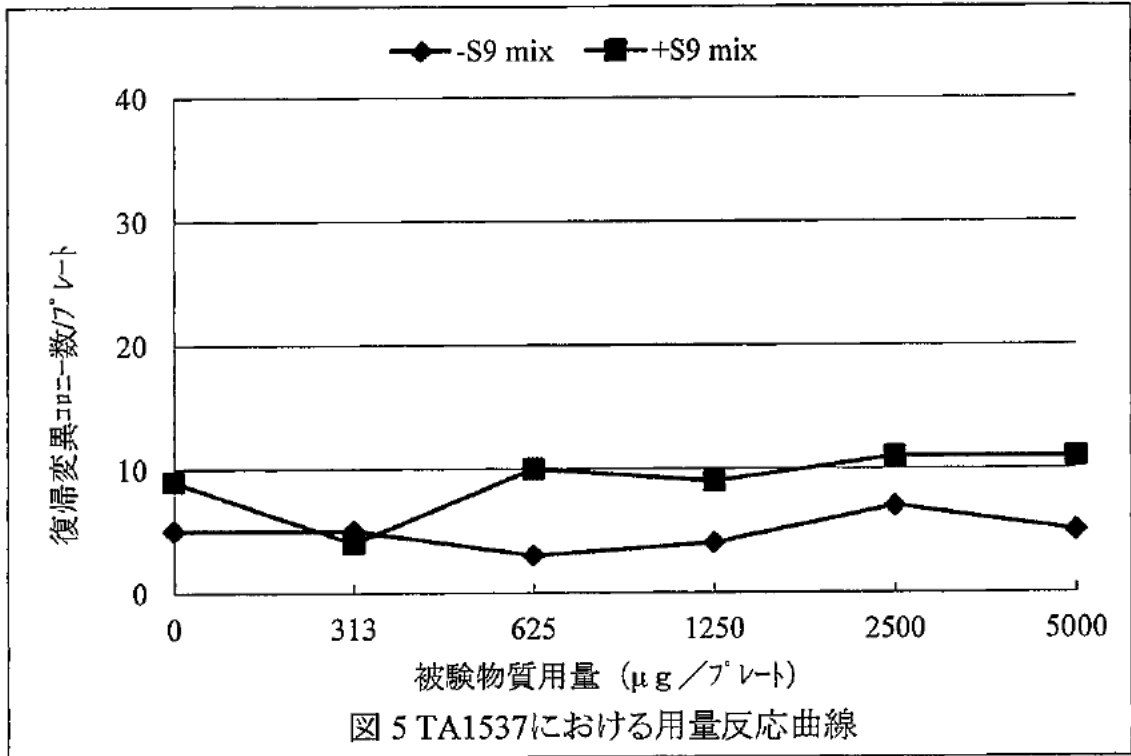

Background Data of the reverse mutation tests in bacteria
at [REDACTED]

CODE No. [REDACTED]

Period: From [REDACTED] to [REDACTED]

(Preincubation Method)

Tester Strains	S9 mix (-) or (+)	Classification	Management ranges		Mean	Management ranges		number of plates
			-3SD	-2SD		+2SD	+3SD	
TA100	-	Solvent control	74	92	128	165	183	234
		Positive control AF-2(0.01µg/plate)	413	455	540	624	666	228
	+	Solvent control	78	97	137	176	196	234
		Positive control B[a]P(5.0µg/plate)	817	927	1146	1365	1475	228
TA1535	-	Solvent control	2	5	11	18	21	234
		Positive control NaN ₃ (0.5µg/plate)	277	331	438	546	599	228
	+	Solvent control	1	4	11	18	21	234
		Positive control 2-AA(2.0µg/plate)	214	256	340	424	466	228
WP2uvrA	-	Solvent control	6	12	24	36	42	234
		Positive control AF-2(0.01µg/plate)	56	72	102	133	148	228
	+	Solvent control	7	14	27	40	47	234
		Positive control 2-AA(10.0µg/plate)	320	409	587	766	855	228
TA98	-	Solvent control	4	11	24	38	45	234
		Positive control AF-2(0.1µg/plate)	430	464	532	600	634	228
	+	Solvent control	14	22	37	52	59	234
		Positive control B[a]P(5.0µg/plate)	248	288	369	449	490	228
TA1537	-	Solvent control	1	1	7	13	16	234
		Positive control ICR-191(1.0µg/plate)	291	630	1310	1989	2329	228
	+	Solvent control	1	3	11	19	23	234
		Positive control B[a]P(5.0µg/plate)	28	42	70	99	113	228

(Notice)

Minimal Glucose Agar Plate Medium : Vital Media AMT-S medium

Solvent controls Water, Dimethylsulfoxide(DMSO), Acetone, *N,N*-dimethylformamide(DMF) and 1,4-Dioxane

Positive controls AF-2 :2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide

NaN₃ :Sodium azide

ICR-191 :2-methoxy-6-chloro-9-[3-(2-chloroethyl)aminopropylamino]acridine·2HCl

B[a]P :Benzo[a]pyrene

2-AA :2-aminanthracene

S9 mix (-) :without metabolic activation

(+) :with metabolic activation